



Sonda para nutrição enteral

Com tecnologia espanhola, a sonda para Nutrição Enteral Bexen é confeccionada em poliuretano macio e permite o fechamento dos esfíncteres cárdia e piloro, proporcionando rápida adaptação ao trato digestivo e diminuindo possíveis efeitos colaterais.

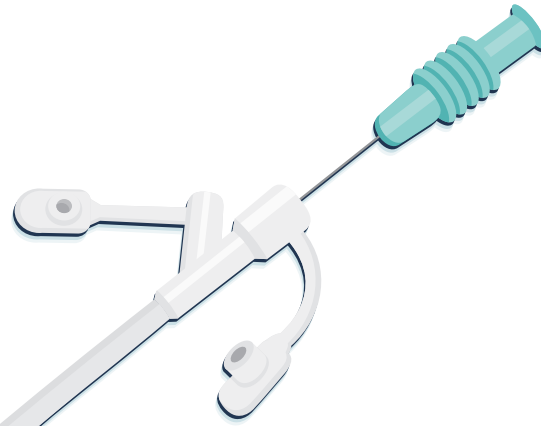

totalmente radiopaca
perfeita visualização

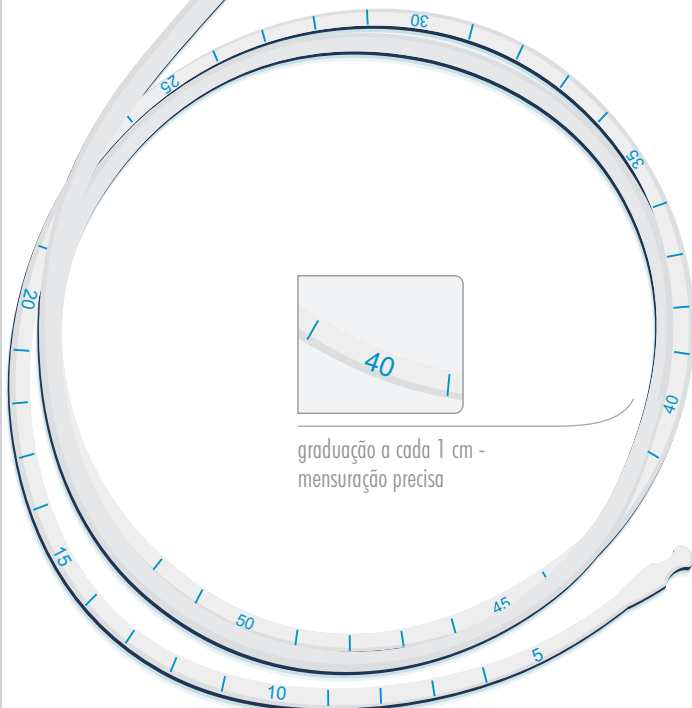

graduação a cada 1 cm -
mensuração precisa

Totalmente Radiopaca - Composta por 20% de sulfato de bário para perfeita visualização aos Raios-X

Pré-lubrificada internamente com silicone - possibilita a retirada do fio guia sem dificuldade

A extremidade distal possui 2 orifícios laterais e 1 orifício mediano - melhor vazão da dieta e menor risco de obstrução da sonda


Ponta em formato de oliva - mínimo risco de traumas, devido à ausência de peso

Durabilidade - não sofre alteração física na presença de pH ácido, conservando sua flexibilidade e maleabilidade


Confeccionada em material altamente biocompatível, totalmente isenta de látex

Detalhes

O fio guia, dimensionado para assegurar a integridade da região nasofaríngea, não alcança a extremidade distal da sonda, promovendo uma progressão segura e atraumática.

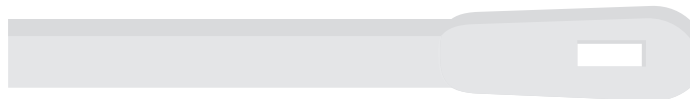


ponta em formato de oliva com orifícios laterais e mediano -
perfeita vazão da dieta

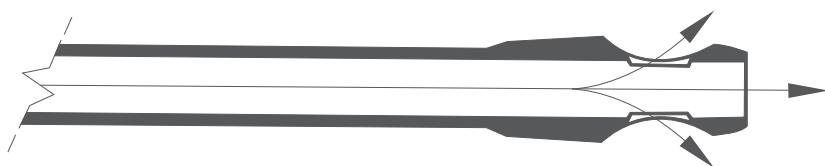

direção do fluxo na sonda

conexão universal com injetor lateral
e tampas para fechamento

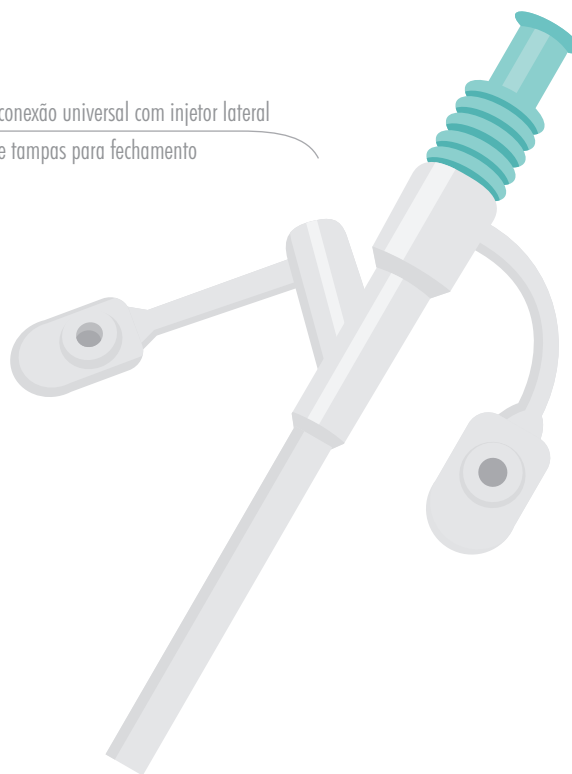

sonda
enteral

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO	TAMANHO
06 Fr	051.06	80 cm
08 Fr	051.08	110 cm
10 Fr	051.10	110 cm
12 Fr	051.12	110 cm

Nº de Registro na ANVISA: 10289689001