


Hemodiálise

Linha de cateteres temporários para Hemodiálise

IMPORTADORA EXCLUSIVA DOS
PRODUTOS NO BRASIL



cateteres extra-fluxo duplo lúmen

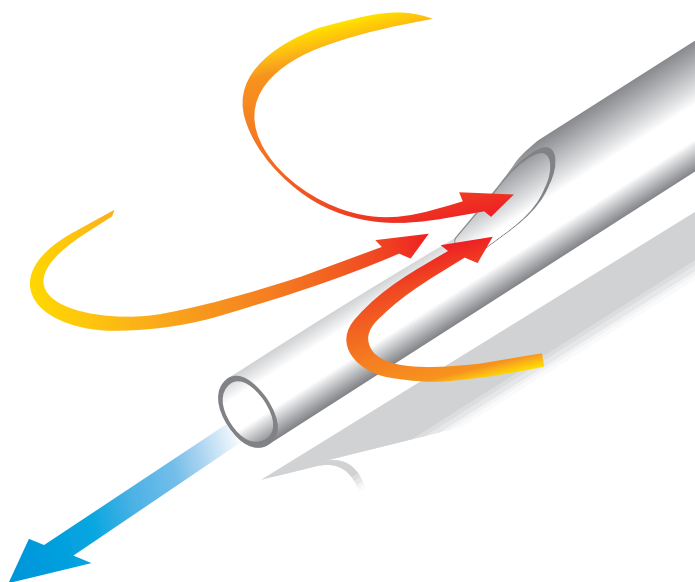

Lúmens em formato duplo D contínuo – Taxa de fluxo otimizada devido ao maior diâmetro interno e baixa resistência na entrada e saída de sangue


Design inovador: sem orifícios laterais, oferece fluxo sanguíneo laminar, mesmo sob altas pressões, reduzindo as taxas de recirculação.

Menor risco de trombose e oclusão devido redução das taxas de turbulência e cisalhamento.




Anel de Sutura anatômico, posicionado verticalmente, para uma menor superfície de contato com a pele - Facilidade na assepsia e na prevenção de irritações e infecções locais.

Pinças resistentes e identificadas com o tamanho e volume interno de cada lúmen. Conectores luer lock seguros.

características e benefícios

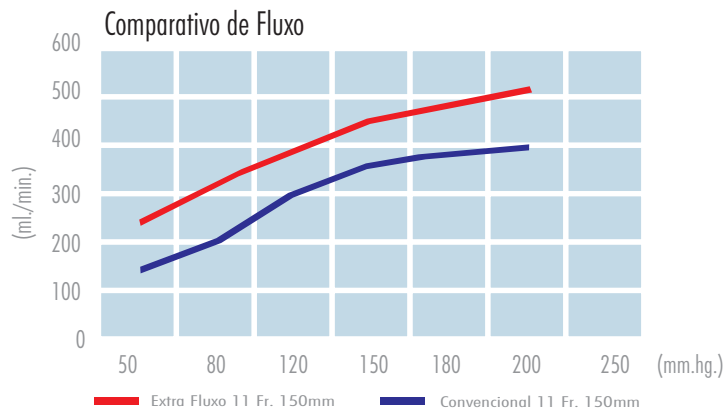

Formato duplo D
Extra Fluxo

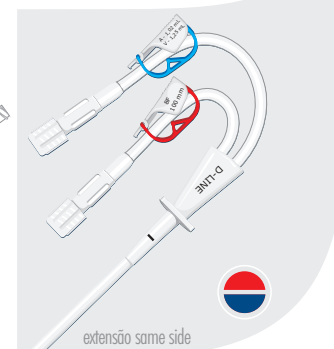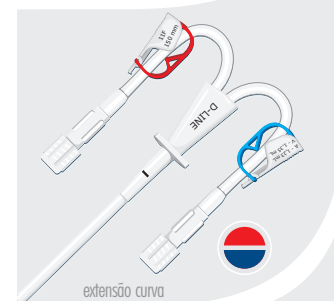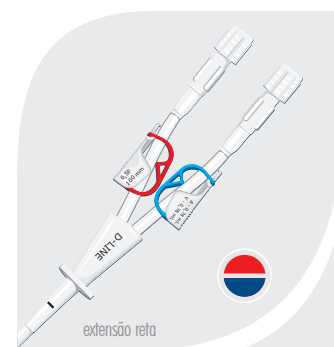


Kit

duplo-lúmen
Extra Fluxo

CÓDIGO	DIÂMETRO		COMPRIMENTO	PRIMING (ml)	
	Fr	mm		ARTERIAL	VENOSO
KDL06P100	6,5	2,0	10,0	0,78	0,78
KDL08P125	8	2,7	12,5	0,89	0,90
KEF11P150	11	3,7	15,0	1,24	1,30
KEF11P150C	11	3,7	15,0	1,29	1,33
KEF11P150R	11	3,7	15,0	1,39	1,61
KEF11P175	11	3,7	17,5	1,30	1,39
KEF11P175C	11	3,7	17,5	1,45	1,54
KEF11P175R	11	3,7	17,5	1,45	1,70
KEF11P200	11	3,7	20,0	1,38	1,46
KEF11P200C	11	3,7	20,0	1,41	1,46
KEF11P200R	11	3,7	20,0	1,39	1,67
KEF11P300	11	3,7	30,0	1,71	1,75
KEF11P300R	11	3,7	30,0	1,86	2,06

Nº de Registro na ANVISA: 10289680059

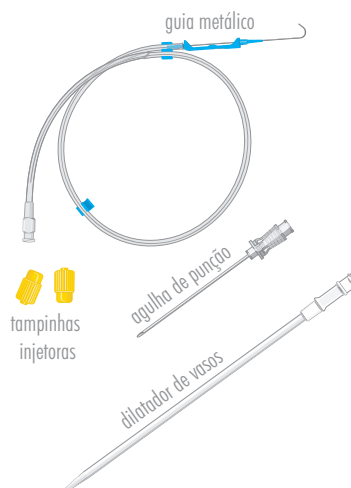

tampinhas
injetoras

características e benefícios

Confeccionado em poliuretano termossensível, isento de látex — Redução de reações de hipersensibilidade promovendo o conforto e o bem estar do paciente. Perfeita adequação à rede venosa.

Superfície macia e lisa impedindo a aderência e formação de trombos.


Extensões em soft poliuretano, que não adquirem memória à utilização dos clamps.

Anel de Sutura anatômico, posicionado verticalmente, para uma menor superfície de contato com a pele - Facilidade na assepsia e na prevenção de irritações/infecções locais.

Pinças resistentes e identificadas com o tamanho e volume interno de cada lúmen. Conectores luer lock seguros.


Disponível nas versões duplo e triplo lúmen — Maior aplicabilidade às infusões venosas.

cateteres duplo e triplo lumen




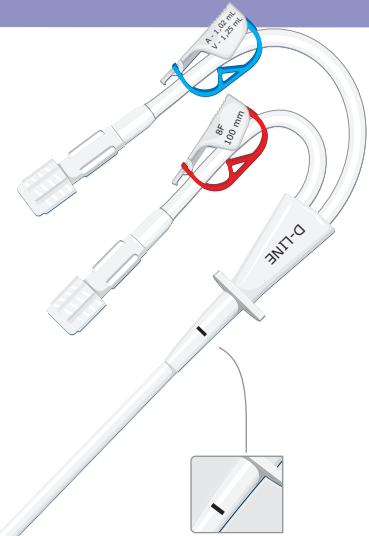


marca guia para implantação do cateter

Kit

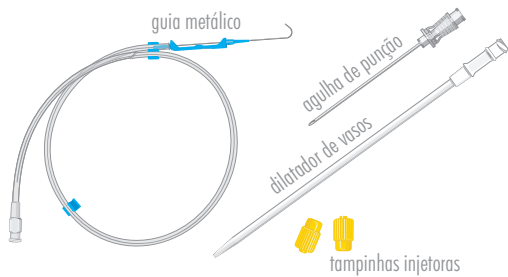

Conforto para o paciente e confiança para você. O Kit que acompanha toda a linha de cateteres temporários foi especialmente desenvolvido para proporcionar uma implantação segura através da técnica de Seldinger. Atendendo as mais rigorosas normas de boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, o kit é certeza de funcionalidade e excelentes resultados.

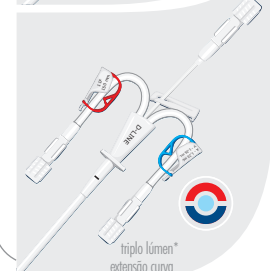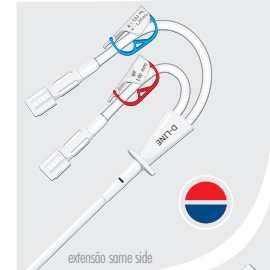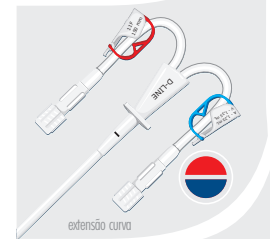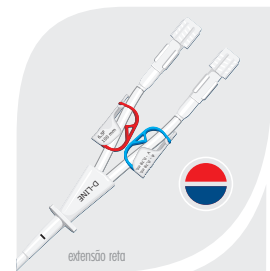

*disponível também no modelo com extensão reta

duplo-lúmen

CÓDIGO	DIÂMETRO		COMPRIMENTO (cm)	PRIMING (ml)	
	Fr	mm		ARTERIAL	VENOSO
KDL11P150	11	3,7	15,0	1,08	1,20
KDL11P150C	11	3,7	15,0	1,23	1,35
KDL11P150R	11	3,7	15,0	1,23	1,51
KDL11P175	11	3,7	17,5	1,16	1,28
KDL11P175C	11	3,7	17,5	1,31	1,43
KDL11P175R	11	3,7	17,5	1,31	1,59
KDL11P200	11	3,7	20,0	1,24	1,36
KDL11P200C	11	3,7	20,0	1,39	1,51
KDL11P200R	11	3,7	20,0	1,39	1,67

triplo-lúmen

CÓDIGO	DIÂMETRO		COMPRIMENTO (cm)	PRIMING (ml)		
	Fr	mm		ARTERIAL	VENOSO	DISTAL
KTL12P150	12	4,0	15,0	1,01	1,08	0,63
KTL12P150C	12	4,0	15,0	1,16	1,23	0,63
KTL12P200	12	4,0	20,0	1,11	1,18	0,69
KTL12P200C	12	4,0	20,0	1,26	1,33	0,69

Legenda: C = extensão curva R = extensão same side
 Disponíveis em outras medidas, sob encomenda. Consulte nosso site ou entre em contato.

Tripla Lúmen
 Oferece uma via alternativa para infusão de soluções.
 Indicado especialmente para pacientes em Terapia Intensiva.