



PICC-Nate[®]

Cateteres para Inserção Periférica

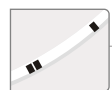


graduação a cada cm

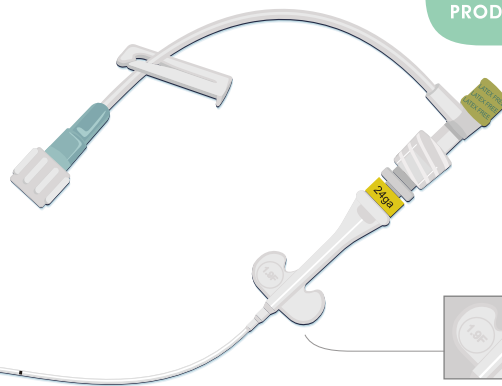

aleta de fixação com tamanho em alto relevo

Silicone: acesso seguro com conforto e precisão

Os cateteres centrais de inserção periférica PICC-Nate[®] em silicone foram desenvolvidos para permitir uma inserção suave, respeitando os tecidos delicados do bebê. Confeccionados em material de alta qualidade, estão indicados para pacientes que necessitam de infusões venosas de longa permanência.

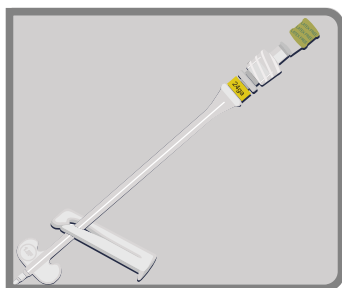

Versão com Hub Estendido:
oferece fácil acesso clínico, elimina a necessidade de extensões, garante a facilidade de assepsia e minimiza possíveis irritações na pele.

Cateter de lúmen único em silicone ou poliuretano tecoflex - permite uma inserção suave e precisa, além de resistência adequada.

Aleta de fixação delgada e com identificação do diâmetro externo do cateter - garante o posicionamento correto e seguro do cateter.

Cateter radiopaco e graduado a cada 01 cm — perfeita localização sem margem de erro.

Introdutor peel away com agulha de punção com sistema visualizador de refluxo — retorno sanguíneo precoce sem injúria vascular, oferece maior segurança ao profissional.

Injetor lateral isento de látex — maior tolerância do paciente às reações de hipersensibilidade.

Poliuretano: acesso seguro com resistência e radiopacidade

Desenvolvido para atender às diferentes demandas dos profissionais, o cateter central de inserção periférica PICC-Nate[®] em poliuretano Tecoflex garante excelente biocompatibilidade, maior resistência e radiopacidade, permitindo ainda uma inserção totalmente segura sem agredir o sistema vascular neonatal.

características e benefícios

Kit

PICC-Nate Full-Tray

Kit Completo

Pensando no conforto dos pequenos pacientes, na segurança dos profissionais e em procedimentos otimizados na unidade neonatal, a bandeja completa oferece as opções do PICC-Nate em silicone® ou em poliuretano para atender as diferentes demandas dos profissionais, acompanhada de todos os itens necessários para a realização da inserção do PICC.



silicone – mini tray

(Cateter + Introdutor + Dispositivo para Descarte)

REF	TAMANHO	COMP.	GAUGE	DIÂMETRO DO LUMEN	EXTENSÃO	INTRODUTOR PEEL-AWAY		
						VOL. PRIME	PICC	GAUGE
PB-2PS	1.9 Fr	35 cm	24	0.36 mm	convencional	0,105cc	22	25 mm
PB-3PS	3.0 Fr	35 cm	20	0.51 mm	convencional	0,145cc	19	35 mm

Nº de Registro na ANVISA: 10289680052

silicone – full tray

(Kit Completo)

REF	TAMANHO	COMP.	GAUGE	DIÂMETRO DO LUMEN	EXTENSÃO	INTRODUTOR PEEL-AWAY		
						VOL. PRIME	PICC	GAUGE
PC-2PS	1.9 Fr	35 cm	24	0.36 mm	convencional	0,105cc	22	25 mm
PC-2LPS	1.9 Fr	35 cm	24	0.36 mm	Hub Estendido	0,13cc	22	25 mm
PC-3PS	3.0 Fr	35 cm	20	0.51 mm	convencional	0,145cc	19	35 mm
PC-3LPS	3.0 Fr	35 cm	20	0.51 mm	Hub Estendido	0,18cc	19	35 mm

Nº de Registro na ANVISA: 10289680070

poliuretano – full tray

(Kit Completo)

REF	TAMANHO	COMP.	GAUGE	DIÂMETRO DO LUMEN	EXTENSÃO	INTRODUTOR PEEL-AWAY		
						VOL. PRIME	PICC	GAUGE
PC-2PP	1.9 Fr	35 cm	24	0.36 mm	convencional	0,105cc	22	25 mm
PC-3PP	3.0 Fr	35 cm	20	0.51 mm	convencional	0,145cc	19	35 mm

Nº de Registro na ANVISA: 10289680071

introdutor peel-away

(Disponível Separadamente)

REF	TAMANHO	GAUGE	COMPRIMENTO
PEEL 2	1.9 Fr	22	25 mm
PEEL 3	3.0 Fr	19	35 mm


Nº de Registro na ANVISA: 10289680069

O kit completo contém:

- 1 Cateter central de inserção periférica Picc-Nate®;
- 1 introdutor peel away;
- 1 seringa com agulha;
- 1 curativo transparente;
- 8 gases (4,0 x 4,0);
- 8 gases (2,0 x 2,0);
- 1 campo fenestrado;
- 1 campo simples;
- 2 réguas;
- 1 pinça de ponta curva;
- 1 tesoura;
- 1 garrote;
- 1 pacote com swab alcoólico;
- 1 pacote com povidine iodado;
- 3 tiras adesivas;
- 1 linha de extensão para infusão;
- 1 dispositivo para descarte de pérfuro-cortante, necessários para a realização da inserção do PICC.



agulha de punção com sistema visualizador de refluxo

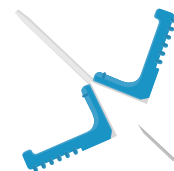

introdutor Peel Away



DISTRIBUIDOR: